




Mesas de operaciones

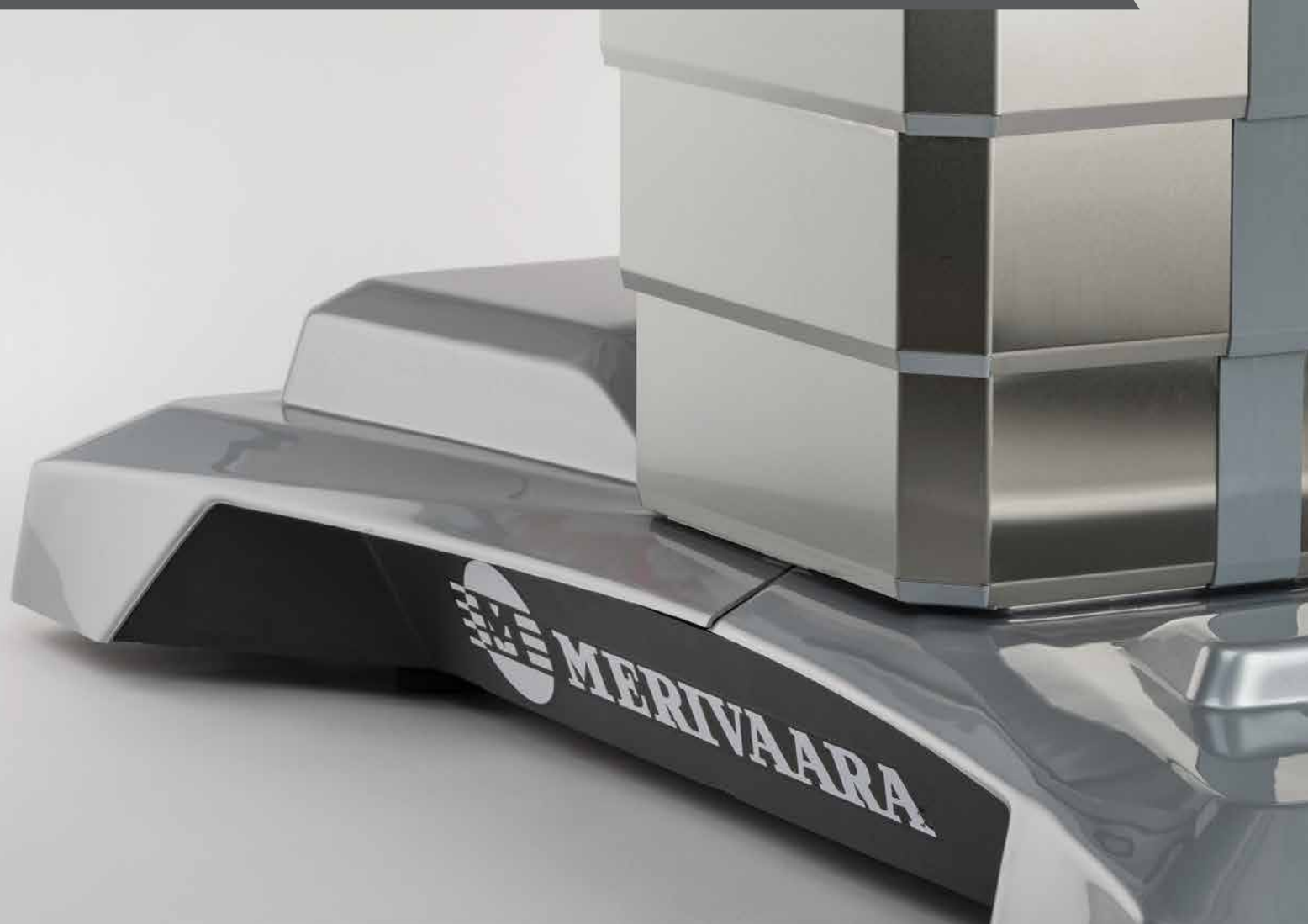


Usabilidad fluida

Desde 1901

“Además de la exquisita calidad del trabajo, hemos tomado el mayor interés en la funcionalidad del equipo. A este respecto, varios médicos comprometidos con la causa han contribuido con sus consejos, basados en sus apreciables experiencias.”

Juho Merivaara en 1926, fundador de Merivaara

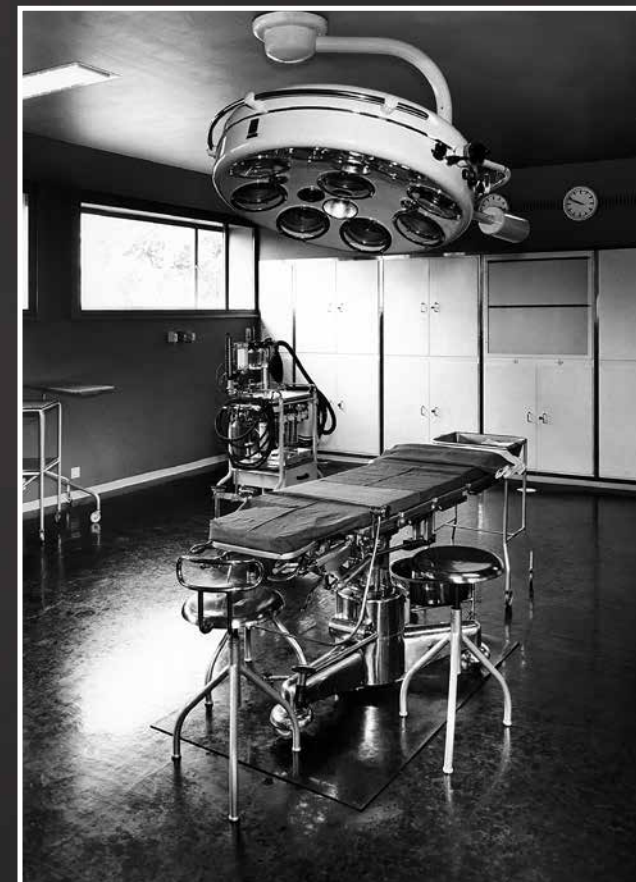


En una moderna sala de operaciones de la década de 1950, mesas y las luces se ajustaron manualmente.



Estamos orgullosos de que los valores de la empresa hace 120 años estaban tan adelantados a su tiempo que todavía hoy pueden ser. Se aplica plenamente al diseñar nuevas soluciones innovadoras, para profesionales sanitarios. Esto se demuestra por nuestros últimos productos galardonados, el Q-Flow quirúrgico Light y la mesa de operaciones Smarter Practico con funcionalidad y facilidad de uso en el corazón del diseño. Nuestras interfaces de usuario se desarrollan junto con personal del hospital para que todos nuestros productos y sistemas ser utilizado intuitivamente.

A esto lo llamamos usabilidad fluida; el personal de la sala de operaciones puede centrarse en la atención al paciente, no en la gestión de tecnologías complejas. Los mejores cirujanos del mundo aprecian esto sobre todo.



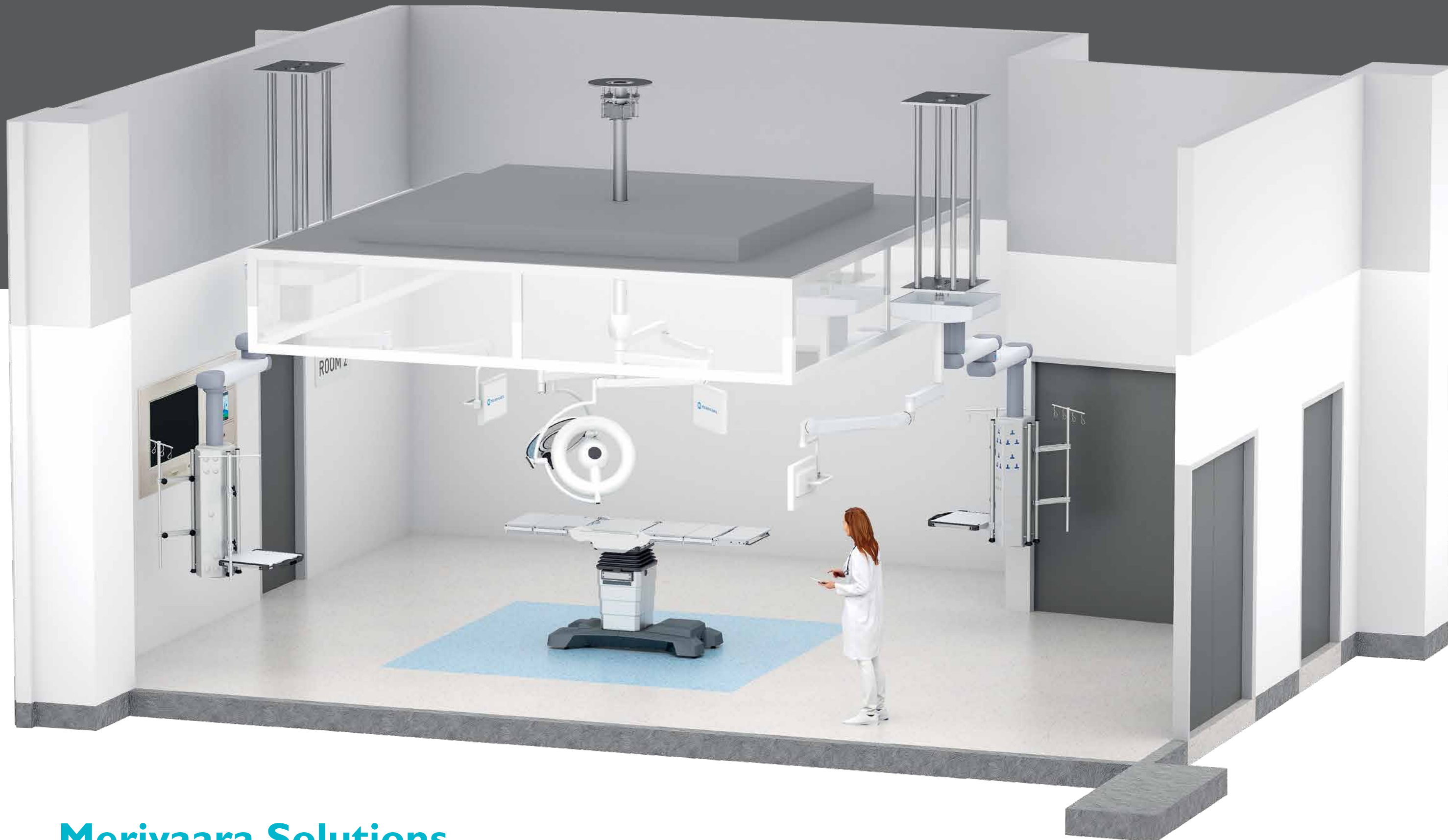

Merivaara Solutions

Merivaara Solutions ofrece a los quirófanos una amplia gama de productos, sistemas y servicios de alta calidad. Nuestras soluciones no solo garantizan la seguridad del paciente, sino que también brindan a los operadores de atención médica la mejor relación calidad-precio.

Al diseñar nuestras soluciones en torno a todo el equipo quirúrgico, es importante que escuchemos las necesidades del cliente. Esto nos permite asegurarnos de que el equipo pueda implementar los procedimientos de manera segura, rápida y confiable. Al mismo tiempo, se optimiza el flujo de trabajo y aumentará la productividad de todo el equipo.

Merivaara tiene una larga experiencia liderando e implementando proyectos en quirófanos. Para nosotros, mantener los proyectos programados y reducir los costos es extremadamente importante.

- LUCES QUIRURGICAS • LUCES DE EXAMEN
- MESAS DE OPERACIÓN • ACCESORIOS DE MESA
- SISTEMAS DE INTERGRACIÓN • MONITORES Y BRAZOS DE MONITOR
- COLGANTES • PROYECTOS • SERVICIOS MERIVAARA

La selección Merivaara Scandia de mesas de operaciones quirúrgicas trae consigo una historia que se remonta a más de 100 años. Las mesas de operaciones Scandia están especialmente diseñadas para procedimientos electivos y mínimamente invasivos, lo que las convierte en la opción perfecta para cirugía ambulatoria y departamentos de estancia corta.

Nuestra experiencia nos convierte en el proveedor que somos hoy a los centros de salud.



SCANDIA  PRIME

Versatilidad para cirugía ambulatoria

Scandia Prime es una excelente opción cuando busca una mesa de operaciones versátil y de alta calidad para cirugía ambulatoria y de corta estancia.

Ejemplos de aplicación:

- Laparoscopia
- Endoscopia
- Artroscopia
- Ortopedia
- Espinal
- Vertebroplastia
- Hemorroides
- Hernia
- Amigdalectomía
- Ginecología y urología



Reflejos

Scandia Prime es una mesa de operaciones quirúrgica electromecánica modular y versátil que ha sido diseñada pensando en la cirugía ambulatoria. El Prime cumplirá con las altas exigencias y expectativas de las modernas salas de cirugía.



Beneficios del Scandia Prime



1. TOTALMENTE MODULAR

- Sistema de bloqueo manual sin esfuerzo
- Secciones intercambiables
- Acceso al área en C
- Rieles laterales a lo largo de toda la superficie de la mesa
- Mesa corrediza
- Base curva para mayor proximidad al paciente



2. ALTA MANIOBRABILIDAD

- Freno manual de acción rápida
- Rueda direccional
- Ruedas grandes que garantizan una maniobrabilidad suave



3. HIGIENICO

- Fácil de limpiar
- Diseñado para evitar la retención de líquidos
- Cubierta de la base de una pieza, sin costuras

4. DISPOSITIVOS DE CONTROL



- Elementos de seguridad incorporados:
 - Controlador manual de 2 toques para un uso seguro
 - Cerradura de seguridad
- Panel de control de respaldo
- Uso intuitivo
- Movimientos limitados por software para evitar colisiones
- Las secciones de la mesa se conducen simultáneamente a la posición O o posiciones de memoria para acelerar la operación





5. AJUSTES DE TENDELENBURG

- Ajuste Trendelenburg motorizado de 30 grados para posicionamiento extremo
- Controlable también desde el panel de control de respaldo



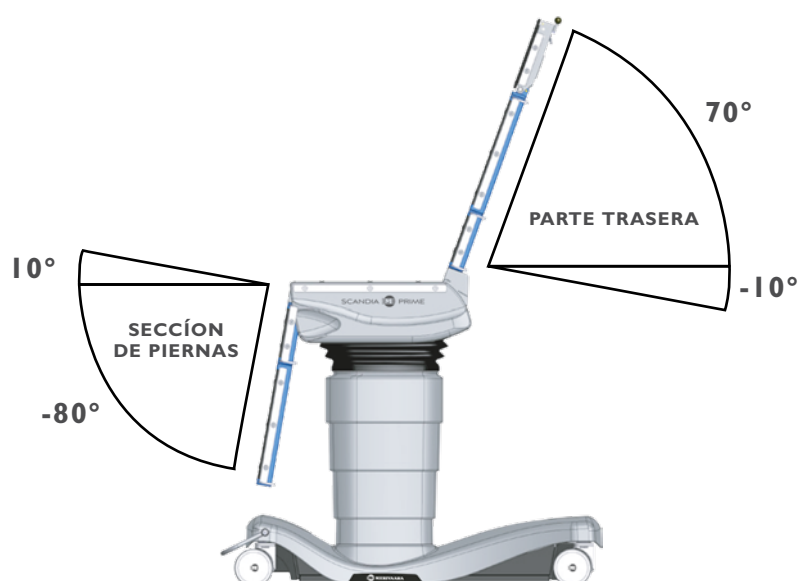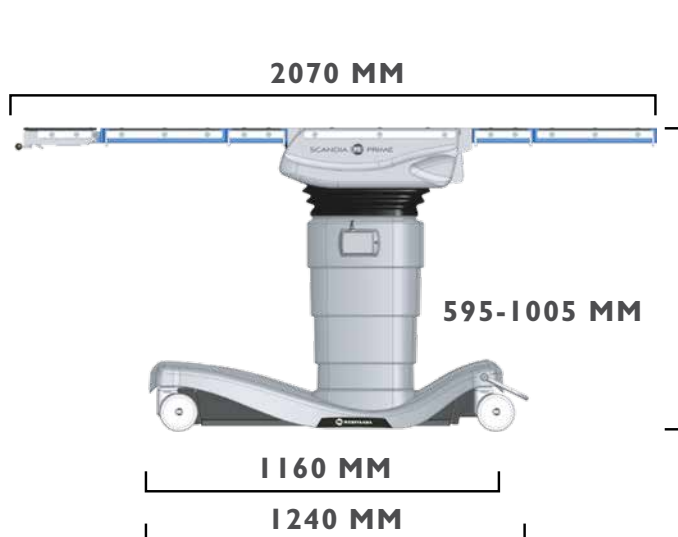

SECCIONES DE PIERNAS Y ESPALDA MOTORIZADAS

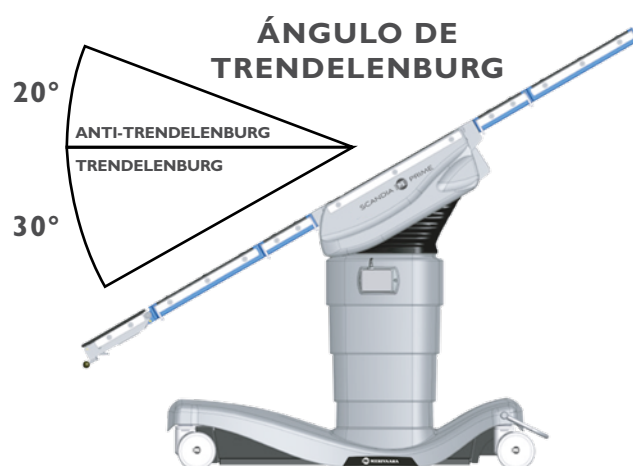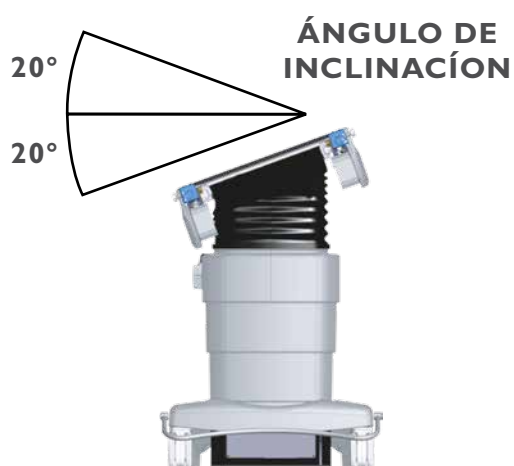

CABEZAL DESLIZANTE {OPCIONAL} 300 MM





Health Technology with a Human Touch

Fabricado en Finlandia con respeto por
nuestra naturaleza única.



MERIVAARA CORP.

Lahti, Finland, Tel. +358 3 3394 611,
merivaara@merivaara.com www.merivaara.com

MERIVAARA EN TODO EL MUNDO

Sede de Merivaara, con I + D, producción, ventas, marketing y funciones de servicio posventa, se encuentran en Lahti, Finlandia. Merivaara tiene filiales en Suecia (Merivaara AB), Reino Unido (Merivaara Ltd) y una organización de ventas en Rusia. Además, los productos de Merivaara se venden en más de 120 países por una red de distribuidores.

El estado de la información, especificaciones e ilustraciones en esta publicación está indicada por la fecha de publicación. Mientras que se ha puesto el mayor cuidado en su compilación,

Merivaara Corp. no es responsable por errores u omisiones. Merivaara Corp. se reserva el derecho de realizar cambios en la tecnología, características, especificaciones y diseño de los equipos y modelos sin notificación. Consulte el sitio web de Merivaara para obtener las últimas especificaciones actualizadas y otra información.

Nota: Todas las posiciones ilustradas de los pacientes son solo ejemplos y se pueden realizar diferentes tipos de procedimientos en función de las necesidades personales o culturales. El posicionamiento adecuado del paciente debe ser realizado por un profesional capacitado.

Todas las marcas comerciales son propiedad de Merivaara a menos que se indique lo contrario. Patentes concedidas o pendientes.
©Merivaara Corp. DOC ID: 6172EN-2, Date: 11/2023